

CATÁLOGO 2024

Implacil
DE BORTOLI



SISTEMA DE IMPLANTE DENTAL

BIENVENIDO AL MUNDO IMPLACIL DE BORTOLI

LÍDER EN TECNOLOGÍA CIENTÍFICA





Con sede social en la ciudad de São Paulo, Implacil De Bortoli construyó a lo largo de sus más de 40 años una trayectoria de espíritu pionero, y produjo en este periodo más de 6 millones de implantes y componentes para casi un millón de pacientes en Brasil y en el mundo.

Una empresa moderna, que usa tecnología de punta y protocolos adecuados para certificaciones nacionales e internacionales en toda su línea de producción.

La búsqueda constante de la excelencia en el desarrollo y fabricación de sus productos se traduce científicamente a través de diversas investigaciones clínicas realizadas por renombrados especialistas en Implantodoncia. Este es uno de los factores que hacen de Implacil De Bortoli una empresa diferenciada en el mercado.

En 2012, el grupo del Dr. Adriano Piattelli, de la Universidad de Chieti, Italia, publicó un artículo en Quintessence destacando que el implante de Implacil De Bortoli obtuvo la tasa de osteointegración más alta del mundo: 92,7 %.

En 2014, el grupo del Dr. Marco Aurélio Bianchini publicó en la revista Clinical Oral Implants Report un artículo en el que presentaba una tasa de supervivencia tras 5 años del 98,28 %, una cifra igual a la de la marca líder mundial.

En 2016, en un estudio que comparaba las superficies de implantes tratadas con dióxido de aluminio y dióxido de titanio, los resultados mostraron que el tratamiento de superficie usado por Implacil De Bortoli obtuvo estadísticamente los mismos valores que el fabricante internacional que se usó como grupo de control.

En un estudio publicado en JOMI, los resultados señalaron que en 23 de las 24 diferentes comparaciones histométricas evaluadas, los implantes de Implacil De Bortoli mostraron parámetros de osteointegración comparables o significativamente superiores a los implantes líderes en el mercado mundial.

¿Qué significa esto para el especialista? La seguridad de que los mismos resultados publicados en revistas científicas de renombre se obtendrán en cualquier clínica, garantizando la previsibilidad de eficacia y seguridad de la técnica y del producto.

Además del equipo de los profesores Nilton, Nilton Junior y Mario Sergio De Bortoli, la empresa cuenta también con un Consejo Científico compuesto por especialistas de renombre que colaboran en la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías y productos, así como en el perfeccionamiento de las técnicas quirúrgicas.

En la actualidad, hay más de 300 cursos asociados en todo el país en las más prestigiosas instituciones de enseñanza de posgrado, a través de los cuales se reciben más de 25.000 estudiantes de Brasil y del extranjero.

Implacil De Bortoli también cuenta con su equipo de ventas y distribuidores capacitados para atender a los más de 30.000 clientes activos y sus necesidades para el uso adecuado de sus productos.

La empresa también cuenta con especialistas clínicos disponibles las 24 horas del día para entender y satisfacer las necesidades de cada cliente y sus pacientes.

En los últimos años, Implacil De Bortoli lanzó una serie de productos exclusivos que hacen de su línea la más completa del mercado, como los implantes Maestro, Due Cone, Veloce, Línea Protésica Ideale, Pilar Z, Conjunto de Cirugía Guiada para implantes cónicos, prótesis CAD/CAM sobre implantes y exclusivos conjuntos quirúrgicos y protésicos.

Como complemento importante a la línea de implantes, Implacil De Bortoli fabrica actualmente el injerto óseo Extra Graft y está desarrollando otros productos para que los implantólogos dispongan de una línea completa de regeneración.

En el mercado brasileño, la marca Implacil De Bortoli está presente en 22 estados, además de países como Argentina, Uruguay, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Italia, Perú, Portugal y Iraq.

Y, para dar continuidad a la obra de su fundador, se creó el Instituto Nilton De Bortoli, que pretende contribuir al desarrollo y perfeccionamiento de la Implantodoncia brasileña en los próximos 40 años, y más allá.



LA PRIMERA EMPRESA DE IMPLANTES DE BRASIL TIENE UNA BUENA HISTORIA QUE CONTAR



Inauguración de la nueva sede y centro de convenciones Implacil De Bortoli en Tamboré, Grande São Paulo.

Lanzamiento del Implante Veloce.

2023



Celebración de 40 años de historia; adquisición de una segunda planta en Tamboré, Grande São Paulo.

2022

Maestro



Lanzamiento del Implante Maestro. Lanzamiento de la Línea Ideale. Road Tour Cine 3D. Implacil Experience. Implacil De Bortoli, según encuesta*, pasa a ser líder en el mercado de São Paulo.

2019

IV Meeting Internacional Implacil De Bortoli.

El primero con proyección 3D en la Odontología brasileña. Road Tour por las principales capitales brasileñas.



2018



Creación del Instituto Nilton De Bortoli y Lanzamiento de la Línea de Componentes protésicos para CAD/CAM. Meeting Internacional 35 años de Implacil De Bortoli.

2017



Certificación internacional mediante la publicación de 7 artículos en revistas de alto impacto.

2013



El implante producido por Implacil De Bortoli alcanza un BIC** del 92,7 %

2012



De Bortoli presenta su nueva generación de implantes, con formato cónico y con tratamiento de superficie, el implante Cono Morse.


2007



Lanzamiento de la línea de implantes con encaje de Hexágono Interno.

2004

Asociación de comercio con ACE Surgical Supply Co. (EE. UU.) – sextavado externo.

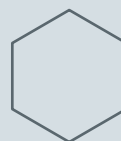


1993



Nilton De Bortoli Junior viaja a los Estados Unidos en busca de la tecnología del implante osteointegrado.

1987

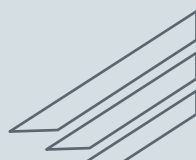

Creación de De Bortoli e inicio de la investigación con implantes osteointegrados.

1985

*Encuesta Panorama de la Implantodencia (IN 2019).
**Machined and sandblasted human dental implants retrieved after 5 years: a histologic and histomorphometric analysis of three cases. Quintessence International 2012;43(4):287-92.
***ImplantNews 2014;11(4):514-8.

Lanzamiento del Pilar Z y de la nueva línea digital CAD/CAM. Inicio de la asociación internacional con W&H y distribución exclusiva del innovador Osstell Beacon en Brasil. Inicio de la asociación con Exocad, líder mundial en softwares dirigidos al flujo digital completo.

2021



I Meeting Digital Implacil De Bortoli, con más de 100 mil visualizaciones. El primer evento en línea de la Implantodoncia mundial.

Implacil De Bortoli recibe la aprobación de la FDA para entrar en el mercado estadounidense de implantes.

2020




CYTOPLAST®

Lanzamiento Due Cono y distribución exclusiva en Brasil de Cytoplast.

2016



Implantes Slim, Implantes de 5 y 6 mm y Cirugía Guiada.

2015

Componentes protésicos con estándar de calidad internacional científicamente probada***.

2014



Obtención de la primera certificación CE. Inicio de la comercialización en Europa.

2010


Implacil
DE BORTOLI

La empresa De Bortoli pasa a llamarse Implacil De Bortoli.

2009



Nilton De Bortoli y Nilton De Bortoli Junior empiezan a enseñar en Fundecto.

1992




Nilton De Bortoli imparte el primer curso de Implantodoncia en la APCD.

1990

La osteointegración llega oficialmente a Brasil con la visita de P-I Brånemark.

1988

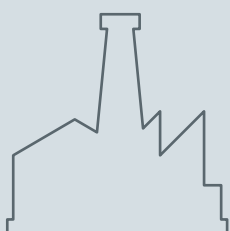

Nilton De Bortoli Junior y Mario Sergio De Bortoli empiezan a trabajar con su padre.

Empiezan a fabricar implantes convencionales: láminas, tornillos y bicorticales.

1982



Nilton De Bortoli viaja a los Estados Unidos para realizar su primer curso sobre implantes dentales.

1972

LÍDER EN COMPROBACIÓN CIENTÍFICA





BIC – BONE IMPLANT CONTACT

IMPLANTES DENTALES MECANIZADOS Y CHORREADOS EXTRAÍDOS DE HUMANOS DESPUÉS DE 5 AÑOS: UN ANÁLISIS HISTOLÓGICO E HISTOMORFOMÉTRICO DE TRES CASOS.

Machined and sandblasted humandental implants retrieved after 5 years: a histologic and histomorphometric analysis of three cases.

Quintessence International – 2012;43(4):287-92.

Giovanna Iezzi, Giovanni Vantaggiato, Jamil A. Shibli, Elisabetta Fiera, Antonello Falco, Adriano Piattelli, Vittoria Perrotti.



TASA DE SUPERVIVENCIA

INDICADORES DE RIESGO DE PERIIMPLANTITIS: UN ESTUDIO RETROSPECTIVO CON 916 IMPLANTES.

Risk indicators for peri-implantitis. A cross-sectional study with 916 implants.

Clin Oral Implants Res – 2017;28(2):144-50. DOI: 101111/clr.12772 (Epub 2016 Jan 11).

Haline Renata Dalago, Guenther Schuldt Filho, Mônica Abreu Pessôa Rodrigues, Stefan Renvert, Marco Aurélio Bianchini.



MENOR TASA DE APARICIÓN DE PERIIMPLANTITIS

INDICADORES DE RIESGO DE PERIIMPLANTITIS: UN ESTUDIO RETROSPECTIVO CON 916 IMPLANTES.

Risk indicators for peri-implantitis. A cross-sectional study with 916 implants.

Clin Oral Implants Res – 2017;28(2):144-50. DOI: 101111/clr.12772 (Epub 2016 Jan 11).

Haline Renata Dalago, Guenther Schuldt Filho, Mônica Abreu Pessôa Rodrigues, Stefan Renvert, Marco Aurélio Bianchini.



SUPERFICIE TiO₂ EQUIVALENTE O SUPERIOR AL AL₂O₃

EVALUACIÓN COMPARATIVA ENTRE MICROPARTÍCULAS DE ALUMINIO Y DIÓXIDO DE TITANIO PARA EL CHORREADO DE SUPERFICIE DE LOS IMPLANTES DENTALES DE TITANIO: UN ESTUDIO EXPERIMENTAL EN CONEJOS.

A comparative evaluation between aluminium and titanium dioxide microparticles for blasting the surface titanium dental implants: an experimental study in rabbits.

Clin Oral Implants Res – 2016 Sep 24.

Sergio A. Gehrke, María P. Ramírez-Fernandez, José Manuel Granero Marín, Marcos Barbosa Salles, Massimo Del Fabbro, José Luis Calvo Guirado.



OSTEOINTEGRACIÓN EQUIVALENTE O SUPERIOR A LOS IMPLANTES IMPORTADOS

ESTÁNDARES DE CICATRIZACIÓN ÓSEA CORTICAL Y TRABECULAR, Y CUANTIFICACIÓN PARA TRES SISTEMAS DIFERENTES DE IMPLANTES DENTALES.

Cortical and trabecular bone healing patterns and quantification for three different dental implant systems.

Int J Oral Maxillofac Implants – 2016;32(3):585-92.

Heloisa F. Marão, Ryo Jimbo, Rodrigo Neiva, Luiz Fernando Gil, Michelle Bowers, Estevam A. Bonfante, Nick Tovar, Malvin N. Janal, Paulo G. Coelho.



ACELERA Y MEJORA LA OSTEOINTEGRACIÓN. ABERTURA PRECOZ

EFFECTOS BIOMECÁNICOS DE UN NUEVO DISEÑO MACROGEOMÉTRICO DE IMPLANTES DENTALES: UN ANÁLISIS EXPERIMENTAL IN VITRO.

Biomechanical Effects of a New Macrogeometry Design of Dental Implants: An In Vitro Experimental Analysis.

J. Funct. Biomater – 2019, 10, 47; doi:10.3390/jfb10040047.

Sergio Alexandre Gehrke, Leticia Pérez-Díaz, Patricia Mazón and Piedad N. De Aza.

NUEVA MACROGEOMETRÍA DE IMPLANTES PARA MEJORAR Y ACELERAR LA OSTEOINTEGRACIÓN: UN ESTUDIO EXPERIMENTAL IN VIVO.

New Implant Macrogeometry to Improve and Accelerate the Osseointegration: An In Vivo. Experimental Study

Appl. Sci – 2019, 9, 3181; doi:10.3390/app9153181.

Sergio Alexandre Gehrke, Jaime Aramburú Júnior, Leticia Pérez-Díaz, Tiago Luis Eirles Treichel, Berenice Anina Dedavid, Piedad N. De Aza, Juan Carlos Prados-Frutos.

EVALUACIÓN BIOMECÁNICA E HISTOLÓGICA DE CUATRO IMPLANTES CON DIFERENTES MACROGEOMETRÍAS EN LA FASE INICIAL DEL PROCESO DE OSTEOINTEGRACIÓN: UN ESTUDIO ANIMAL IN VIVO.

Biomechanical and histological evaluation of four different implant macrogeometries in the early osseointegration process: An in vivo animal study.

Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials, Volume 125, January 2022, 104935.


Sergio Alexandre Gehrke, Jaime Aramburú Júnior, Tiago Luis Eirles Treichel, Berenice Anina Dedavid.

due cone

CM AR

CARACTERÍSTICAS

- » Implante cónico con encaje Cono Morse;
- » Rehabilitación inmediata o tardía;
- » Unitario/múltiple;
- » Instalación en cualquier densidad ósea: tipo I, II, III y IV;*;
- » Superficie tratada con chorreado y grabado ácido alternados;
- » Doble sellado morse que permite mayor estabilidad y mayor sellado bacteriano del componente protésico;
- » Indexación que permite 12 posiciones;
- » Diseño revolucionario de las roscas trapecoidales acelera la condensación ósea, gracias a la perfecta combinación de la conicidad del implante y formato de las espiras;
- » Viene con cover 1 mm;
 - » Instalación: Llave Hexagonal n.º 7 - 1,17 mm;
- » Aplicación implante:
 - » Instalación del implante 2 mm infraóseo;
 - » Se necesita un perfil gingival superior a 1,5/2 mm;
- » Rotación:
 - » Perforación: 800-1.200 rpm;
 - » Instalación: 20 rpm;
- » Par para instalación sugerido de hasta 60 Ncm.

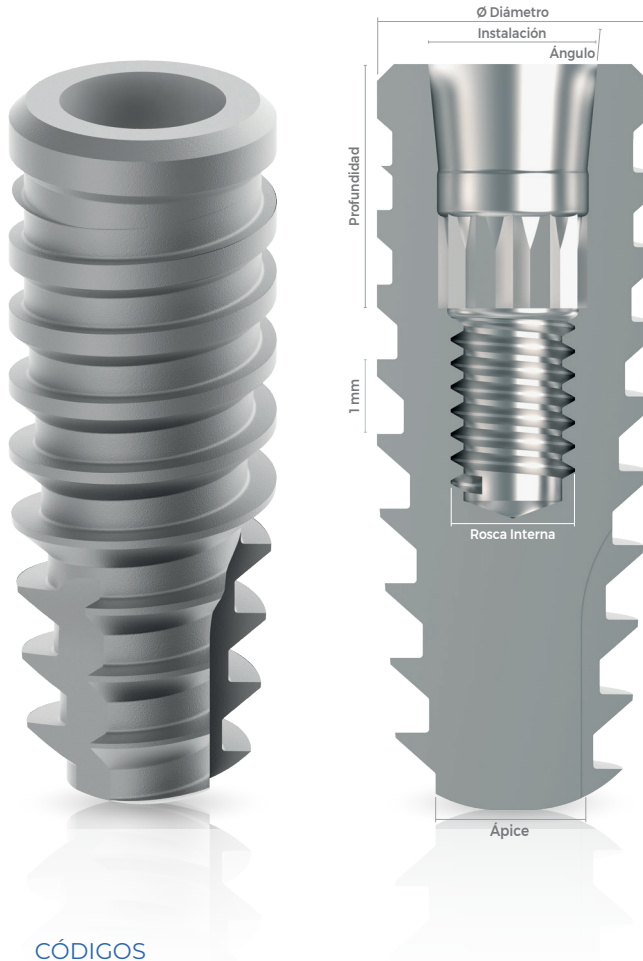

CÓDIGOS

Longitud	Código			
	Ø 3,5 mm	Ø 4,0 mm	Ø 4,5 mm	Ø 5,0 mm
7 mm	22274	222860	22298	24069
9 mm	22276	22288	22300	24071
11 mm	22278	22290	22302	24073
13 mm	22280	22292	22304	240758
15 mm	22282	22294	22306	24077
17 mm	22284	22296	-	-

ESPECIFICACIONES

Longitud	7 9 11 13 15 17 mm			
Diámetro	3,5 mm	4,0 mm	4,5 mm	5,0 mm
Ápice	2,0 mm	2,8 mm	3,0 mm	3,5 mm
Profundidad	3,5 mm	3,5 mm	3,5 mm	3,5 mm
Rosca Interna	1,8 mm	1,8 mm	1,8 mm	1,8 mm
Instalación	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm
Ángulo	11,5°	11,5°	11,5°	11,5°

LLAVES INSTALACIÓN




Para implantes Ø 3,5/3,5/4,0/5,0.



COVER/ TAPA IMPLANTE

0 mm (adicional)	34519
1 mm (viene con)	34521
2 mm (adicional)	34522

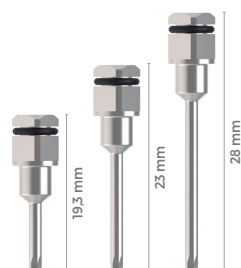

LLAVE PARA INSTALACIÓN COVER

Llave Hexagonal n.º 7 - 1,17 mm		
Clave Corta	19,3 mm	20626
Clave Promedio	23 mm	18685
Llave Larga	28 mm	20619

*Indicación de aplicación ósea según la Clasificación de Lekholm y Zarb. Para realizar la preparación del lecho para implantes cónicos, se debe usar la fresa correspondiente a la longitud del implante previsto, respetando la secuencia ilustrada, según el tipo de hueso.

LH - Fresa Lanza Helicoidal | FC - Fresa Cónica | ES - Escariador/oseodensificador

The diagram shows four cross-sectional views of dental implants with different abutment types. Each view includes a grey implant body, a yellow bone area, and red gum tissue. The abutments are labeled TIPO I, TIPO II, TIPO III, and TIPO IV. TIPO I has a long, narrow neck. TIPO II has a wider base. TIPO III has a wider base and a more pronounced neck. TIPO IV has the widest base and a very short neck.

Carga inmediata	Par: 35 Ncm mínimo / 60 Ncm máximo.	Finalización tras la osteointegración. Tiempo mínimo: 12 semanas.
Carga tardía	Par sugerido: 60 Ncm.	

The diagram illustrates the components of a dental implant system, showing various parts labeled with numbers 1 through 18. The components are arranged in a row, showing different views and details of the implant system.

- Implant Body:** The main part of the implant, shown in three views (left, middle, and right). It features a textured surface and a central channel. The diameter is labeled as $\varnothing 3.0$.
- Abutment:** The part that connects the implant body to the crown. It is shown in the middle view, labeled with numbers 1, 2, 3, 4, 7, 9, 11, and 13.
- Crown:** The visible part of the implant, shown in the right view. It is labeled with numbers 7, 9, 11, 13, 14, 16, and 18.
- Longitudinal Implant:** A detailed view of the implant body, labeled with numbers 1, 2, 3, 4, 7, 9, 11, and 13.

CICATRIZADOR




- » El objetivo del cicatrizador es la remodelación del tejido gingival, preparándolo para la finalización del caso y la aplicación protésica del componente sobre el implante;
- » El tiempo estimado para alcanzar el objetivo de remodelación es de 7 a 30 días;
- » Instalación: Llave Hexagonal n.º 7 - 1,17 mm.

CM

Cinta	Ø 3,5	Ø 4,5	Ø 5,5
0,8 mm	208895	208963	30219
1,5 mm	208901	208970	30221
2,5 mm	208918	208987	30223
3,5 mm	208925	208994	30225
4,5 mm	208932	209007	30227
5,5 mm	208949	209014	30229

Para implantes de 7 mm a 17 mm. CM/CM AR/CM 11,5° compatibles.

TRANSFER ANALÓGICO

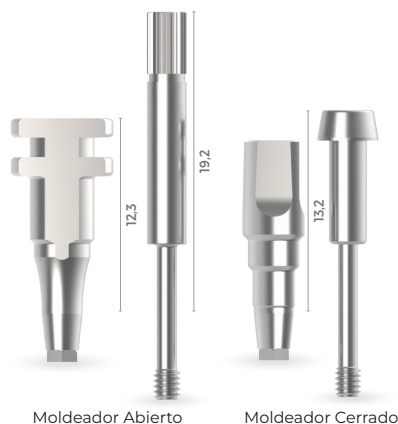

- » El transferente Cono Morse CM AR se usa para copiar la posición del implante en la arcada dental, permitiendo su reproducción en el modelo de yeso. Sobre este modelo se puede seleccionar el pilar intermedio que se instalará en el paciente o incluso confeccionar el trabajo protésico sobre el pilar instalado en el modelo. De esta forma, el pilar debe ser indexado (CM AR);
- » Instalación Transfer Moldeador Abierto: Llave Hexagonal n.º 7 - 1,17 mm;
- » Instalación Transfer Moldeador Cerrado: Llave Fricción n.º 3.

CM AR

Moldeador	Ø todos
Abierto CM AR	228930
Cerrado CM AR	228923

Para implantes de 7 mm a 17 mm. CM AR.

TRANSFER DIGITAL



- » El transferente Digital Cono Morse CM AR se usa para copiar la posición del implante en la arcada dental mediante escaneo intraoral o escaneo de modelo de yeso. Sobre este modelo se puede seleccionar el Pilar Base T y confeccionar digitalmente la prótesis, pudiendo fresar o imprimir este elemento. De esta forma, el pilar debe ser indexado (CM AR);
- » Instalación Transfer Digital: Llave Hexagonal n.º 7 - 1,17 mm.

CM AR

Digital CM AR	Ø todos
CM AR D/Y	30769

Para implantes de 7 mm a 17 mm. CM AR.

Software Exocad®.

D/Y - Digital o Yeso.

ANÁLOGO D/Y - HÍBRIDO



Usado en modelos de laboratorio Digital impreso o en Yeso (D/Y), el análogo puede aplicarse para implantes convencionales (7 mm / 17 mm).

CM AR

CM AR D/Y	Ø todos
CM AR D/Y	31509


Para implantes de 7 mm a 17 mm. CM AR. Uso de componentes AR.

CM 11,5° compatible solo para el modelo de estudio y la selección de componentes.

Análogo Digital para Software Exocad®.

D/Y - Digital o Yeso.

SECUENCIA DE APLICACIÓN

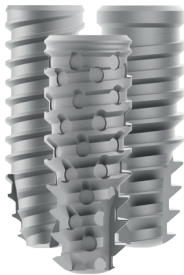IMPLANTE	CICATRIZACIÓN/PROVISIONAL	TRANSFER	ANÁLOGO D/Y
Maestro CM AR Due Cone CM AR Veloce CM AR 	Para implantes de 7 a 17 mm. Secuencia para generar el modelo de estudio o uso de componentes CM AR 	(ANALÓGICO) Moldeador Abierto CM AR Cód. 228930 	CM AR Para implantes de 7 mm a 17 mm Cód. 31509 
		Moldeador Cerrado CM AR Cód. 228923 	
	Pilar Provisional CM AR 	DIGITAL Transfer Digital CM CM Exocad® Cód. 30769 	


Secuencia para generar el modelo de estudio o uso de componentes CM AR.

CM AR Para uso en implantes Cono Morse Due Cone o implantes Maestro.

PRÓTESIS ATORNILLADA

APLICACIÓN

- » Indicación para casos unitarios;
- » Pilar indexado CM AR;
- » Pilar provisional para carga inmediata o tardía;
- » Puede utilizarse para la personalización de cicatrizador con el uso de resina compuesta;
- » En rehabilitaciones con pilares Base T, este pilar se puede usar para confeccionar el provisional atornillado durante el periodo en que se confecciona la prótesis definitiva en el CAD/CAM;
- » Este pilar no debe usarse como pilar definitivo, sin embargo, puede permanecer como provisional durante un periodo de tiempo más largo. Al ser de titanio, no se corroe y no sufre micromovimientos;
- » Instalación: Llave Hexagonal n.º 7 - 1,17 mm;
- » Par de instalación: 20 Ncm.

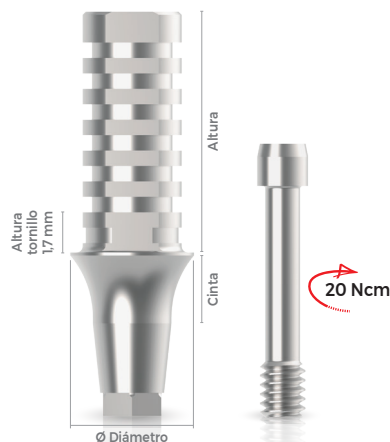


CM AR

Cinta	Diámetro	Altura	Código
0,8 mm	Ø 4,0	8 mm	27489
1,5 mm	Ø 4,0	8 mm	26805
2,5 mm	Ø 4,0	8 mm	26807
3,5 mm	Ø 4,0	8 mm	26809


Para implantes de 7 mm a 17 mm. CM AR.

SECUENCIA DE APLICACIÓN

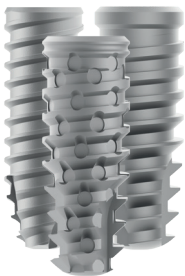IMPLANTE	COMPONENTE	INSTALACIÓN	TRANSFER	ANÁLOGO D/Y
Maestro CM AR Due Cone CM AR Veloce CM AR 	Pilar Provisional CM AR 	Llave Hexagonal n.º 7 - 1,17 mm Corta Cód. 20626 Promedio Cód. 18685 Larga Cód. 20619 	Moldeador Abierto CM AR Cód. 228930  Moldeador Cerrado CM AR Cód. 228923 	CM AR Para implantes de 7 mm a 17 mm Cód. 31509 

APLICACIÓN

- » Indicación para casos unitarios;
- » Antirrotacional (AR);
- » Componente calcinable con una base de cromo cobalto, usado para la fundición, también conocido como coping plástico con base metálica;
- » La mejor indicación para la fabricación de pilares personalizados;
- » Componente versátil que puede cementarse o atornillarse;
- » Viene con tornillo definitivo;
- » Instalación Transfer de Moldeador Abierto: Llave Hexagonal n.º 7 - 1,17 mm;
- » Instalación Transfer Moldeador Cerrado: Llave Fricción n.º 3;
- » Instalación: Llave Hexagonal n.º 7 - 1,17 mm;
- » Par de instalación: 20 Ncm.

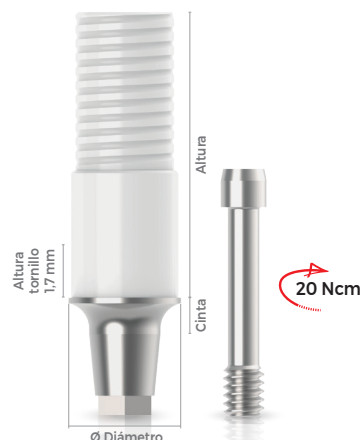



CM AR CC

Cinta	Diámetro	Altura	Código
0,8 mm	Ø 4,0	10,2 mm	32790
1,5 mm	Ø 4,0	10,2 mm	32792
2,5 mm	Ø 4,0	10,2 mm	32794
3,5 mm	Ø 4,0	10,2 mm	32796

Para implantes de 7 mm a 17 mm. CM AR.

CC - Cromo Cobalto

SECUENCIA DE APLICACIÓN

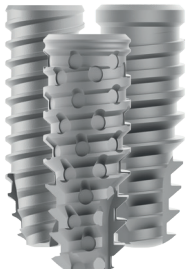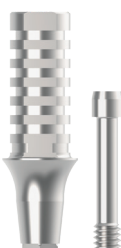IMPLANTE	CICATRIZADOR/ PROVISIONAL	TRANSFER	ANÁLOGO D/Y	COMPONENTE	INSTALACIÓN
Maestro CM AR Due Cone CM AR Veloce CM AR 	Cicatrizador  Pilar Provisional CM AR 	Moldeador Abierto CM AR Cód. 228930  Moldeador Cerrado CM AR Cód. 228923 	CM AR Cód. 31509 	Ucla CM AR CC 	Llave Hexagonal n.º 7 - 1,17 mm Corta Cód. 20626 Promedio Cód. 18685 Larga Cód. 20619 

APLICACIÓN

- » Indicación para casos unitarios;
- » Indicado para prótesis cementadas o atornilladas;
- » Pilar sólido, cuerpo único (no posee indexación);
- » Diámetro: 3,3 y 4,5;
- » Altura: de 4,0 y 6,0;
- » Cintas: 0,8/1,5/2,5/3,5/4,5/5,5;
- » Los pilares de 4,0 mm de altura permiten cementar la prótesis con total seguridad de retención independientemente de su diámetro (3,3 o 4,5);
- » Puede aplicarse en implantes Cono Morse Convencional y Cono Morse AR Due Cone y Maestro;
- » Todos los diámetros y cintas pueden utilizarse en cualquier diámetro de implantes Cono Morse y Cono Morse CM AR y Maestro, facilitando la solución protésica;
- » Su principal indicación es para prótesis unitarias, pudiendo utilizarse para prótesis múltiples;
- » Tiene análogos, transferentes de moldeado (plástico), casquillos de provisional atornillado (titanio) y fundición (plástico) correspondientes al diámetro y altura de los pilares;
- » En casos de prótesis múltiples, necesita paralelismo;
- » Estos componentes no pueden usarse en implantes CM ST Cono Morse de 5 y 6 mm;
- » Para usar el Pilar Ideale como elemento atornillado, se debe añadir 2 mm a la planificación; este aumento se refiere al uso del tornillo para la fijación de la corona;
- » Los Casquillos Plásticos no vienen con tornillos; tornillos Hexagonales y Torx compra opcional; el casquillo de Titanio viene con Tornillo Hexagonal de 1,17 mm para Provisional Atornillado o uso como Tapa de Cicatrización;
- » Instalación Pilar: utilizar la llave muñón/pilar adecuada para el diámetro y la altura del pilar seleccionado (llave Universal 3,3x4/3,5x4, 3,3x6/3,5x6, 4,5x4 o 4,5x6);
- » Casquillo Atornillado (titanio o plástico): llave Hexagonal n.º 7 - 1,17 mm;
- » Par de instalación Pilar: 30 Ncm;
- » Par de instalación para Casquillo en Prótesis Atornilladas: 10 Ncm.



CM

Diámetro x Altura				
Cinta	3,3x4	3,3x6	4,5x4	4,5x6
0,8 mm	25733	25745	25757	25769
1,5 mm	25735	25747	25759	25771
2,5 mm	257374	25749	25761	25773
3,5 mm	25739	257510	25763	257756
4,5 mm	25741	25753	25765	25777
5,5 mm	25743	25755	25767	25779

Para implantes de 7 mm a 17 mm.

CM/CM AR/CM 11,5° compatibles.



CONOZCA MÁS



Diámetro	Altura	Llave Instalación	Transfer Analógico	Transfer Digital Exocad®	Análogo D/Y	Casquillo Plástico C/A AR	Casquillo Titanio P AR	Tornillo Casquillo Hexagonal	Tornillo Casquillo Torx	Túnel Check Prótesis CM
Ø 3,3 mm	4 mm	32229	29190	30789	31518	25849	25861			
	6 mm	32230	29191	30791	31519	25852	25864			
Ø 4,5 mm	4 mm	32231	29192	30793	31520	25855	25866	4763	30131	20701
	6 mm	32232	29193	30795	31521	25858	25868			

SECUENCIA DE APLICACIÓN

PILAR	INSTALACIÓN	CICATRIZACIÓN/PROVISIONAL	TRANSFER	ANÁLOGO D/Y	CASQUILLO (ANALÓGICO)	ATORNILLADA	FINALIZACIÓN
Recto	Llave 30 Ncm	Casquillo Titanio Antirrotacional Atornillado (Provisional/Tapa de Cicatrización)	ANALÓGICO DIGITAL EXOCAD®		Casquillo Plástico Antirrotacional Cementado o Atornillado (Laboratorio Analógico)	Tornillo Casquillo (Atornillado) Tornillo Hexagonal 1,17 mm Cód. 4763 Tornillo Torx T6 1,4 x 2,7 mm Cód. 30131	Elemento Cementado (Cementación) Elemento Atornillado Llave n.º 7 Llave Torx T6 10 Ncm

AR – Antirrotacional | C/A – Cementada o Atornillada | A – Atornillada | D/Y – Digital o Yeso.

Casquillo de titanio y transfer digital vienen con tornillo hexagonal de 1,17 mm. Casquillos de plástico no vienen con tornillos, ya que pueden utilizarse como cementados (sin tornillo) o atornillados. El tornillo hexagonal de 1,17 mm o el tornillo Torx T6 deben adquirirse por separado. Compruebe siempre si dispone de la llave correspondiente en su conjunto protésico.



APLICACIÓN

- » Indicación para casos unitarios;
- » Indicado para prótesis cementadas o atornilladas;
- » Permite su instalación en 12 posiciones por la presencia del index;
- » Angulado 17° y 30° (consultar columna CA);
- » Diámetro: 3,3 y 4,5;
- » Altura: de 4,0 y 6,0;
- » Los pilares de 4,0 mm de altura permiten cementar la prótesis con total seguridad de retención independientemente de su diámetro (3,3 o 4,5);
- » Cintas 1,5, 2,5 y 3,5;
- » Debe aplicarse a implantes Cono Morse AR Due Cone y Maestro;
- » No compatible con otros sistemas de implantes;
- » El posicionamiento indexado (AR) permite reposicionar el elemento cuando sea necesario;
- » Permite la rehabilitación de implantes con posición desfavorable, favoreciendo el paralelismo entre ellos o con los dientes adyacentes;
- » Todos los diámetros y cintas pueden utilizarse en cualquier diámetro de implantes Cono Morse y CM AR, facilitando la solución protésica;
- » Su principal indicación es para prótesis unitarias, pudiendo utilizarse para prótesis múltiples;
- » En casos de prótesis múltiples, necesita paralelismo;
- » Tiene análogos, transferentes de moldeado (plástico), casquillos de provisional atornillado (titanio) y fundición (plástico) correspondientes al diámetro y altura de los pilares;
- » Estos componentes no pueden usarse en implantes CM ST Cono Morse de 5 y 6 mm;
- » Para usar el Pilar Ideal como elemento atornillado, se debe añadir 2 mm a la planificación; este aumento se refiere al uso del tornillo para la fijación de la corona;
- » Los Casquillos Plásticos no vienen con tornillos; tornillos Hexagonales y Torx compra opcional; el casquillo de Titanio viene con Tornillo Hexagonal de 1,17 mm para Provisional Atornillado o uso como Tapa de Cicatrización;
- » Par de instalación Pilar: 20 Ncm;
- » Instalación Pilar: Llave Hexagonal n.º 7 - 1,17 mm;
- » Casquillo Atornillado (titanio o plástico): Llave Hexagonal n.º 7 - 1,17 mm;
- » Par de instalación para Casquillo en Prótesis Atornilladas: 10 Ncm.



CONOZCA MÁS




Diámetro	Altura	Transfer Analógico	Transfer Digital Exocad®	Análogo D/Y	Casquillo Plástico C/A AR	Casquillo Titanio P AR	Tornillo Casquillo Hexagonal	Tornillo Casquillo Torx	Túnel Check Prótesis CM
Ø 3,3 mm	4 mm	29190	30789	31518	25849	25861	4763	30131	20701
	6 mm	29191	30791	31519	25852	25864			
Ø 4,5 mm	4 mm	29192	30793	31520	25855	25866			
	6 mm	29193	30795	31521	25858	25868			

SECUENCIA DE APLICACIÓN

PILAR	INSTALACIÓN	CICATRIZACIÓN/ PROVISIONAL	TRANSFER	ANÁLOGO D/Y	CASQUILLO (ANALÓGICO)	ATORNILLADA	FINALIZACIÓN
Angulado AR (Laboratorio)	Llave Hexagonal n.º 7 - 1,17 mm Corta Cód. 20626 Promedio Cód. 18685 Larga Cód. 20619	Casquillo Titanio Antirrotacional Atornillado (Provisional/Tapa de Cicatrización)	ANALÓGICO DIGITAL EXOCAD®		Casquillo Plástico Antirrotacional Cementado o Atornillado (Laboratorio Analógico)	Tornillo Casquillo (Atornillado) Tornillo Hexagonal 1,17 mm Cód. 4763 Tornillo Torx T6 1,4 x 2,7 mm Cód. 30131	Elemento Cementado (Cementación) Elemento Atornillado Llave n.º 7 Llave Torx T6 10 Ncm

AR – Antirrotacional | C/A – Cementada o Atornillada | A – Atornillada | D/Y – Digital o Yeso.

*Cinta ángulo: se debe añadir el valor correspondiente considerando como cinta la suma de la cinta ángulo a la cinta seleccionada. Casquillo de titanio y transfer digital vienen con tornillo hexagonal de 1,17 mm. Casquillos de plástico no vienen con tornillos, ya que pueden utilizarse como cementados (sin tornillo) o atornillados. El tornillo hexagonal de 1,17 mm o el tornillo Torx T6 deben adquirirse por separado. Compruebe siempre si dispone de la llave correspondiente en su conjunto protésico.

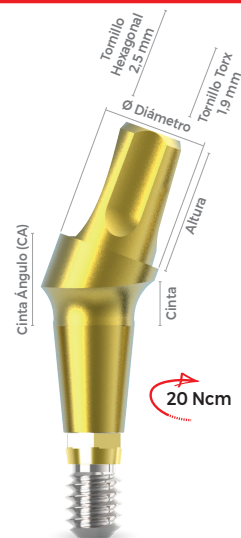

CM AR

Diámetro x Altura x Cinta x Cinta Ángulo (CA)						
Cinta	3,3x4	3,3x6	CA 17°	4,5x4	4,5x6	CA 17°
1,5 mm	25871	25877	2,6 mm	25883	25889	3,1 mm
2,5 mm	25873	25879	3,6 mm	25885	25891	4,1 mm
3,5 mm	25875	25881	4,6 mm	25887	25893	5,1 mm
Cinta	3,3x4	3,3x6	CA 30°	4,5x4	4,5x6	CA 30°
1,5 mm	25895	25901	3,2 mm	25907	25913	3,8 mm
2,5 mm	25897	25903	4,2 mm	25909	25915	4,8 mm
3,5 mm	25899	25905	5,2 mm	25911	25917	5,8 mm

Para implantes de 7 mm a 17 mm. CM AR.

OPCIÓN DE MOLDEADO PARA SELECCIÓN DE COMPONENTES.




Componentes para Implantes	Transfer CM AR Mold. Abierto	Transfer CM AR Mold. Cerrado	Análogo CM/CM AR
Transferencia del implante	228930	228923	227667



APLICACIÓN

- » Indicación para casos unitarios;
- » Indicado para prótesis cementadas o atornilladas;
- » Permite la instalación en cualquier posición por la ausencia del index;
- » Angulado 17° y 30° (consultar columna CA);
- » Diámetro: 3,3 y 4,5;
- » Altura: de 4,0 y 6,0;
- » Los pilares de 4,0 mm de altura permiten cementar la prótesis con total seguridad de retención independientemente de su diámetro (3,3 o 4,5);
- » Cintas 1,5, 2,5 y 3,5;
- » Puede aplicarse en implantes Cono Morse Convencional y Cono Morse AR Due Cone y Maestro;
- » Permite la rehabilitación de implantes con posición desfavorable, favoreciendo el paralelismo entre ellos o con los dientes adyacentes;
- » Todos los diámetros y cintas pueden utilizarse en cualquier diámetro de implantes Cono Morse y CM AR, facilitando la solución protésica;
- » Su principal indicación es para prótesis unitarias, pudiendo utilizarse para prótesis múltiples;
- » En casos de prótesis múltiples, necesita paralelismo;
- » Tiene análogos, transferentes de moldeado (plástico), casquillos de provisional atornillado (titanio) y fundición (plástico) correspondientes al diámetro y altura de los pilares;
- » Estos componentes no pueden usarse en implantes CM ST Cono Morse de 5 y 6 mm;
- » Para usar el Pilar Ideale como elemento atornillado, se debe añadir 2 mm a la planificación; este aumento se refiere al uso del tornillo para la fijación de la corona;
- » Par de instalación Pilar: 20 Ncm;
- » Instalación Pilar: Llave Hexagonal n.º 7 - 1,17 mm;
- » Casquillo Atornillado (titanio o plástico): llave Hexagonal n.º 7 - 1,17 mm;
- » Los Casquillos Plásticos no vienen con tornillos; tornillos Hexagonales y Torx compra opcional; el casquillo de Titanio viene con Tornillo Hexagonal de 1,17 mm para Provisional Atornillado o uso como Tapa de Cicatrización;
- » Par de instalación para Casquillo en Prótesis Atornilladas: 10 Ncm.

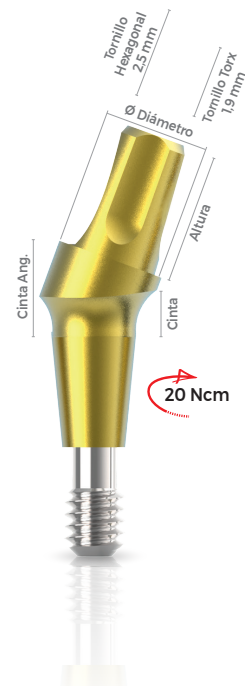

CM

Diámetro x Altura x Cinta x Cinta Ángulo (CA)						
Cinta	3,3x4	3,3x6	CA 17°	4,5x4	4,5x6	CA 17°
1,5 mm	25781	25787	2,6 mm	25793	25799	3,1 mm
2,5 mm	25783	25789	3,6 mm	25795	25801	4,1 mm
3,5 mm	25785	25791	4,6 mm	25797	25803	5,1 mm
Cinta	3,3x4	3,3x6	CA 30°	4,5x4	4,5x6	CA 30°
1,5 mm	25805	25811	3,2 mm	25817	25823	3,8 mm
2,5 mm	25807	25813	4,2 mm	25819	25825	4,8 mm
3,5 mm	25809	25815	5,2 mm	25821	25827	5,8 mm

Para implantes de 7 mm a 17 mm. CM/CM AR/CM 11,5° compatibles.



CONOZCA MÁS



Diámetro	Altura	Transfer Analógico	Transfer Digital Exocad®	Análogo D/Y	Casquillo Plástico C/A AR	Casquillo Titanio P AR	Tornillo Casquillo Hexagonal	Tornillo Casquillo Torx	Túnel Check Prótesis CM
Ø 3,3 mm	4 mm	29190	30789	31518	25849	25861			
	6 mm	29191	30791	31519	25852	25864			
Ø 4,5 mm	4 mm	29192	30793	31520	25855	25866	4763	30131	20701
	6 mm	29193	30795	31521	25858	25868			

SECUENCIA DE APLICACIÓN

PILAR	INSTALACIÓN	CICATRIZACIÓN/ PROVISIONAL	TRANSFER	ANÁLOGO D/Y	CASQUILLO (ANALÓGICO)	ATORNILLADA	FINALIZACIÓN
Angulado	Llave Hexagonal n.º 7 - 1,17 mm Corta Cód. 20626 Promedio Cód. 18685 Larga Cód. 20619	Casquillo Titanio Antirrotacional Atornillado (Provisional/Tapa de Cicatrización)	ANALÓGICO DIGITAL EXOCAD®		Casquillo Plástico Antirrotacional Cementado o Atornillado (Laboratorio Analógico)	Tornillo Casquillo (Atornillado) Tornillo Hexagonal 1,17 mm Cód. 4763 Tornillo Torx T6 1,4 x 2,7 mm Cód. 30131	Elemento Cementado (Cementación) Elemento Atornillado Llave n.º 7 Llave Torx T6 10 Ncm

AR - Antirrotacional | C/A - Cementada o Atornillada | A - Atornillada | D/Y - Digital o Yeso.

*Cinta ángulo: se debe añadir el valor correspondiente considerando como cinta la suma de la cinta ángulo a la cinta seleccionada.

Casquillo de titanio y transfer digital vienen con tornillo hexagonal de 1,17 mm. Casquillos de plástico no vienen con tornillos, ya que pueden utilizarse como cementados (sin tornillo) o atornillados. El tornillo hexagonal de 1,17 mm o el tornillo Torx T6 deben adquirirse por separado. Compruebe siempre si dispone de la llave correspondiente en su conjunto protésico.



PRÓTESIS CEMENTADA/ATORNILLADA

APLICACIÓN

- » Indicación para casos unitarios;
- » Los pilares Base T son componentes protésicos usados para sistemas CAD/CAM. Permiten fabricar pilares cerámicos personalizados para una amplia gama de soluciones individualizadas;
- » La línea Base T también cuenta con el sistema Transfer Digital para implante o Transfer Digital Base T para copiar el Base T, que ofrece una calidad de superficie superior y una geometría única para obtener resultados de escaneo de alta precisión.
- » Instalación Base T: Llave Hexagonal n.º 7 - 1,17 mm;
- » Par de instalación: 20 Ncm;
- » Para uso en Exocad® realice la descarga en nuestro sitio web.



CONOZCA MÁS



CM AR

Cinta	Ø 3,5	Ø 4,5
0,8 mm	24536	24544
1,5 mm	24538	24546
2,5 mm	24540	24548
3,5 mm	24542	24550
Divergencia	Ø 4,0	Ø 5,0
Descripción	Small	Large

Para implantes de 7 mm a 17 mm. CM AR.



TRANSFER DIGITAL IMPLANTE CM AR

Descripción
CM AR 30769



TRANSFER DIGITAL BASE T

Descripción
Base T Ø 3,5 31683
Base T Ø 4,0 (4,5) 31784

SECUENCIA DE APLICACIÓN – ESCaneo INTRAORAL

IMPLANTE	CICATRIZADOR/ PROVISIONAL	TRANSFER DIGITAL	INSTALACIÓN	ANÁLOGO D/Y	COMPONENTE	INSTALACIÓN
Maestro CM AR Due Cone CM AR Veloce CM AR	Cicatrizador Pilar Provisional CM AR 20 Ncm	CM AR Cód. 30769	Llave Hexagonal n.º 7 - 1,17 mm Corta Cód. 20626 Promedio Cód. 18685 Larga Cód. 20619 20 Ncm	CM AR Cód. 31509	Base T CM AR 20 Ncm	Llave Hexagonal n.º 7 - 1,17 mm Corta Cód. 20626 Promedio Cód. 18685 Larga Cód. 20619 20 Ncm

SECUENCIA DE APLICACIÓN – ESCaneo EXTRAORAL


IMPLANTE	CICATRIZADOR/ PROVISIONAL	TRANSFER	TRANSFER DIGITAL	ANÁLOGO D/Y	COMPONENTE	INSTALACIÓN
Maestro CM AR Due Cone CM AR Veloce CM AR	Cicatrizador Pilar Provisional CM AR 20 Ncm	Moldeador Abierto CM AR Cód. 228930 Moldeador Cerrado CM AR Cód. 228923	CM AR Cód. 30769	CM AR Cód. 31509	Base T CM AR 20 Ncm	Llave Hexagonal n.º 7 - 1,17 mm Corta Cód. 20626 Promedio Cód. 18685 Larga Cód. 20619 20 Ncm



PRÓTESIS ATORNILLADA

APLICACIÓN

- » Indicación para casos múltiples;
- » Prótesis atornilladas;
- » Prótesis fijas y protocolos en general;
- » El conjunto del componente y los accesorios requiere una altura interoclusal aproximada de 4,8 mm, debiendo considerarse también el volumen metalocerámico según la planificación y ejecución protésica;
- » El componente angulado de 17° o 30° permite corregir la angulación de los implantes;
- » Instalación Mini Cónico Recto: Llave Cónico Estético/Mini Cónica - n.º 5;
- » Instalación Mini Cónico Angulado/Casquillo/Tornillo del Transfer de Moldeador Abierto: Llave Hexagonal n.º 7 - 1,17 mm;
- » Instalación Transfer Mini Cónico Moldeador Cerrado: Llave Fricción n.º 3;
- » Par de instalación: 20 Ncm;
- » Par de instalación del casquillo: 10 Ncm.

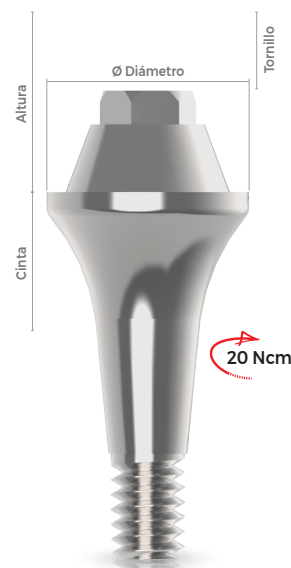

CM

Cinta	Ø Diámetro 4,8
0,8 mm	17305
1,5 mm	17312
2,5 mm	17329
3,5 mm	17336
4,5 mm	17343
5,5 mm	17350

Para implantes de 7 mm a 17 mm.

CM/CM AR/CM 11,5° compatibles.

SECUENCIA DE APLICACIÓN


TIPO	INSTALACIÓN	CICATRIZACIÓN/ PROVISIONAL	TRANSFER ANALÓGICO	TRANSFER DIGITAL EXOCAD®	ANÁLOGO D/Y	CASQUILLO	INSTALACIÓN CASQUILLO	REPOSICIÓN
Recto Múltiple	Llave n.º 5 Promedio Cód. 18661  20 Ncm	Tapa de Cicatrización Cód. 18548 	Transfer Mold. Abierto Rotacional Cód. 13512 			Casquillo Base Cromo Rotacional (Laboratorio) Cód. 27434  10 Ncm		Tornillo Casquillo (Atornillado) Tornillo Hexagonal 1,17 mm Cód. 4787 Llave Hexagonal n.º 7 - 1,17 mm 
	Llave Hexagonal n.º 7 - 1,17 mm Corta Cód. 20626 Promedio Cód. 18685 Larga Cód. 20619  20 Ncm	Casquillo Titanio Rotacional (Provisional) Cód. 18302  10 Ncm	Transfer Mold. Cerrado Rotacional Cód. 4282 	Rotacional Cód. 30783  10 Ncm	Rotacional Cód. 30880 	Casquillo Plástico Rotacional (Laboratorio) Cód. 17749  10 Ncm	Llave Hexagonal n.º 7 - 1,17 mm Corta Cód. 20626 Promedio Cód. 18685 Larga Cód. 20619  10 Ncm	Tornillo Torx T6 1,4x2,0 mm Cód. 30129 Llave Torx T6  Tornillo Trabajo Casquillo Cód. 24686 Llave Hexagonal n.º 7 - 1,17 mm 
Angulado Múltiple						Pilar Base T Rotacional (CAD/CAM MetalFree) Cód. 25488 		

*Cinta ángulo: se debe añadir el valor correspondiente considerando como cinta la suma de la cinta ángulo a la cinta seleccionada.

Casquillos plásticos, Base Cromo y Pilar digital Base T vienen con tornillo hexagonal de 1,17 mm. El tornillo Torx debe adquirirse por separado.

APLICACIÓN


- » Indicación para casos múltiples;
- » Prótesis atornilladas;
- » Prótesis fijas y protocolos en general;
- » El conjunto del componente y los accesorios requiere una altura interoclusal aproximada de 4,8 mm, debiendo considerarse también el volumen metalocerámico según la planificación y ejecución protésica;
- » El componente angulado de 17° o 30° permite corregir la angulación de los implantes;
- » Instalación Mini Cónico Recto: Llave Cónico Estético/Mini Cónica - n.º 5;
- » Instalación Mini Cónico Angulado/Casquillo/Tornillo del Transfer de Moldeador Abierto: Llave Hexagonal n.º 7 - 1,17 mm;
- » Instalación Transfer Mini Cónico Moldeador Cerrado: Llave Fricción n.º 3;
- » Par de instalación: 20 Ncm;
- » Par de instalación del casquillo: 10 Ncm.

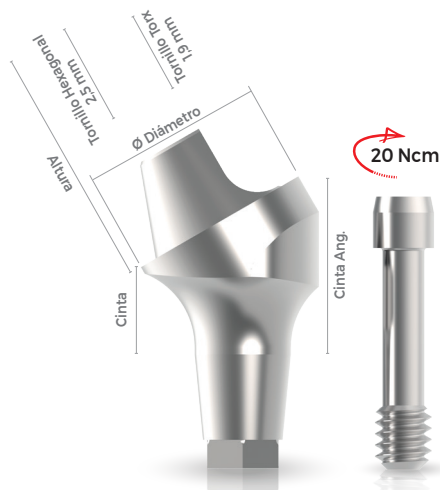

CM AR

Cinta	Cinta Ángulo 17°	Código
0,8 mm	2,2 mm	228565
1,5 mm	2,9 mm	228602
2,5 mm	3,9 mm	228640
3,5 mm	4,9 mm	228688
Cinta	Cinta Ángulo 30°	Código
0,8 mm	3,2 mm	228589
1,5 mm	3,9 mm	228626
2,5 mm	4,9 mm	228664
3,5 mm	5,9 mm	228701

Para implantes de 7 mm a 17 mm. CM AR.
Diámetro del componente Ø 4,8 mm.

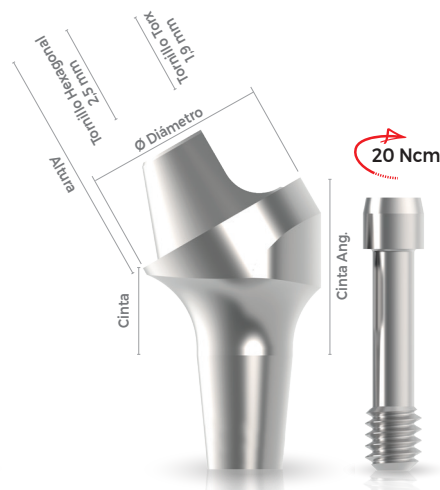

CM

Cinta	Cinta Ángulo 17°	Código
0,8 mm	2,2 mm	24198
1,5 mm	2,9 mm	24211
2,5 mm	3,9 mm	24235
3,5 mm	4,9 mm	24259
Cinta	Cinta Ángulo 30°	Código
0,8 mm	3,2 mm	24204
1,5 mm	3,9 mm	24228
2,5 mm	4,9 mm	24242
3,5 mm	5,9 mm	24266

Para implantes de 7 mm a 17 mm.

CM/CM AR/CM 11,5° compatibles.

SECUENCIA DE APLICACIÓN

TIPO	INSTALACIÓN	CICATRIZACIÓN/PROVISIONAL	TRANSFER ANALÓGICO	TRANSFER DIGITAL EXOCAD®	ANÁLOGO D/Y	CASQUILLO	INSTALACIÓN CASQUILLO	REPOSICIÓN
Recto Múltiple	Llave n.º 5 Promedio Cód. 18661  20 Ncm	Tapa de Cicatrización Cód. 18548 	Transfer Mold. Abierto Rotacional Cód. 13512 	Rotacional Cód. 30783 	Rotacional Cód. 30880 	Casquillo Base Cromo Rotacional (Laboratorio) Cód. 27434 10 Ncm 	Llave Hexagonal n.º 7 - 1,17 mm Corta Cód. 20626 Promedio Cód. 18685 Larga Cód. 20619  10 Ncm	Tornillo Casquillo (Atornillado) Tornillo Hexagonal 1,17 mm Cód. 4787 Llave Hexagonal n.º 7 - 1,17 mm 
	Llave Hexagonal n.º 7 - 1,17 mm Corta Cód. 20626 Promedio Cód. 18685 Larga Cód. 20619  20 Ncm	Casquillo Titanio Rotacional (Provisional) Cód. 18302 10 Ncm 	Transfer Mold. Cerrado Rotacional Cód. 4282 	Rotacional Cód. 30783 10 Ncm 	Rotacional Cód. 30880 	Casquillo Plástico Rotacional (Laboratorio) Cód. 17749 10 Ncm 	Llave Hexagonal n.º 7 - 1,17 mm Corta Cód. 20626 Promedio Cód. 18685 Larga Cód. 20619  10 Ncm	Tornillo Torx T6 1,4x2,0 mm Cód. 30129 Llave Torx T6 
Angulado Múltiple	Llave Hexagonal n.º 7 - 1,17 mm Corta Cód. 20626 Promedio Cód. 18685 Larga Cód. 20619  20 Ncm	Casquillo Titanio Rotacional (Provisional) Cód. 18302 10 Ncm 	Transfer Mold. Cerrado Rotacional Cód. 4282 	Rotacional Cód. 30783 10 Ncm 	Rotacional Cód. 30880 	Pilar Base T Rotacional (CAD/CAM MetalFree) Cód. 25488 	Llave Hexagonal n.º 7 - 1,17 mm Corta Cód. 20626 Promedio Cód. 18685 Larga Cód. 20619  10 Ncm	Tornillo Trabajo Casquillo Cód. 24686 Llave Hexagonal n.º 7 - 1,17 mm 
	Llave Hexagonal n.º 7 - 1,17 mm Corta Cód. 20626 Promedio Cód. 18685 Larga Cód. 20619  20 Ncm	Casquillo Titanio Rotacional (Provisional) Cód. 18302 10 Ncm 	Transfer Mold. Cerrado Rotacional Cód. 4282 	Rotacional Cód. 30783 10 Ncm 	Rotacional Cód. 30880 	Pilar Base T Rotacional (CAD/CAM MetalFree) Cód. 25488 	Llave Hexagonal n.º 7 - 1,17 mm Corta Cód. 20626 Promedio Cód. 18685 Larga Cód. 20619  10 Ncm	Tornillo Trabajo Casquillo Cód. 24686 Llave Hexagonal n.º 7 - 1,17 mm 

*Cinta ángulo: se debe añadir el valor correspondiente considerando como cinta la suma de la cinta ángulo a la cinta seleccionada.
Casquillos plásticos, Base Cromo y Pilar digital Base T vienen con tornillo hexagonal de 1,17 mm. El tornillo Torx debe adquirirse por separado.

PRÓTESIS OVERDENTURE

APLICACIÓN

- » Componente esférico individual con diversas alturas de cintas para overdentures (sobredentadura);
- » Pilar sólido, cuerpo único;
- » También indicado para paciente con dificultad de higiene;
- » Necesita paralelismo;
- » No usado como elemento unitario;
- » Instalación: Llave O'ring Hexagonal n.º 2 - 2,5 mm;
- » Par de instalación: 25 Ncm.

COMPOSICIÓN DEL ENVASE

- » Componente O'ring;
- » Cápsula Metálica Estándar (con goma);
- » Anillo Plástico;
- » Cápsula Plástica.



VEA LA
ORIENTACIÓN
DE USO.



CM

Cinta	Ø Diámetro 4,0
Ø 0,8 mm	24280
Ø 1,5 mm	24297
Ø 2,5 mm	24303
Ø 3,5 mm	24310
Ø 4,5 mm	24327
Ø 5,5 mm	24334

Para implantes de 7 mm a 17 mm.

CM/CM AR/CM 11,5° compatibles.


SECUENCIA DE APLICACIÓN

IMPLANTE	CICATRIZACIÓN	TRANSFER	ANÁLOGO D/Y	COMPONENTE	INSTALACIÓN	COMPONENTE	CÁPSULA
Maestro CM AR Due Cone CM AR Veloce CM AR	Cicatrizador	Transfer CM AR Mold. Abierto Cód. 228930 Transfer CM AR Mold. Cerrado Cód. 228923	CM AR Para implantes de 7 mm a 17 mm Cód. 31509	O'Ring	Llave O'ring n.º 2 Cód. 18630 25 Ncm	Anillo Cápsula Metálica	Plástica

Para implantes de 5 mm y 6 mm de longitud no se deben aplicar componentes O'ring.

QUIRÚRGICO PRIMO CÓNICO

CM/HE/HI – Ø 3,5 y 4,0

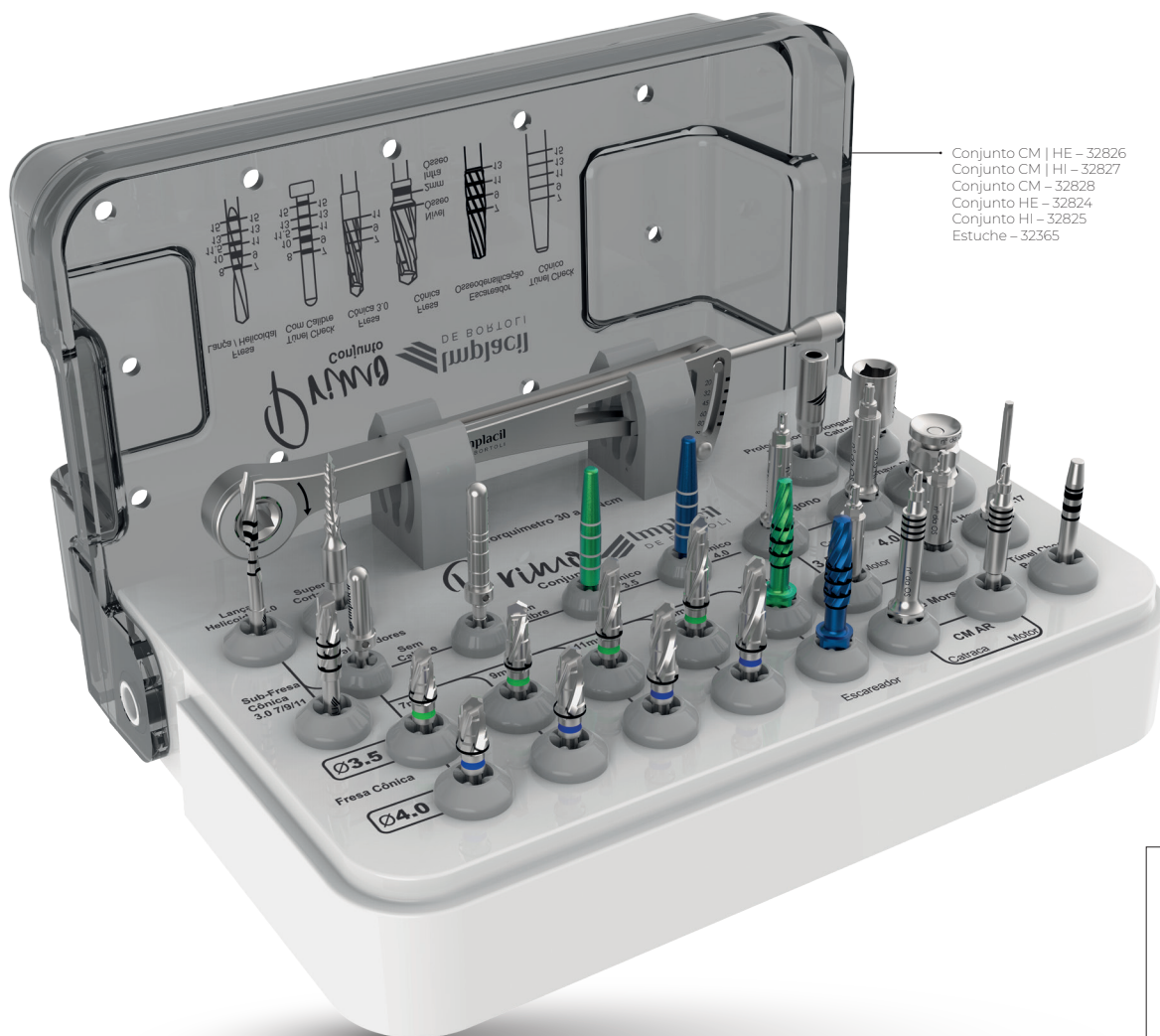

Conjunto CM | HE – 32826
Conjunto CM | HI – 32827
Conjunto CM – 32828
Conjunto HE – 32824
Conjunto HI – 32825
Estuche – 32365

CARACTERÍSTICAS

El estuche Primo Cónico se desarrolló para componer de forma fácil y organizada las más diferentes configuraciones de uso. Contempla la selección de llaves e instrumentales necesarios para cirugías con implantes cónicos Hexágono Externo o Hexágono Interno e implantes cónicos Cono Morse.

Otra innovación: este conjunto también contempla la realización de los implantes de 3,5 y 4,0 de diámetro, con longitudes de 7 mm a 13 mm. Esta configuración satisface una enorme demanda clínica diaria, desde los planes más sencillos hasta los más complejos.

Este conjunto también dispone de fresas cónicas o incluso la combinación del uso de escariadores para que el profesional pueda realizar fresados, subfresados u oseodensificación, según las necesidades óseas y la técnica deseada.

Seleccionamos aquí dos configuraciones que pueden satisfacer sus necesidades.

Vea en la tabla las configuraciones HE | CM y HI | CM, y recuerde que el profesional aún puede componer la mejor manera de atender su práctica clínica de forma simple y aprovechar al máximo todo el sistema de implantes Implacil De Bortoli.

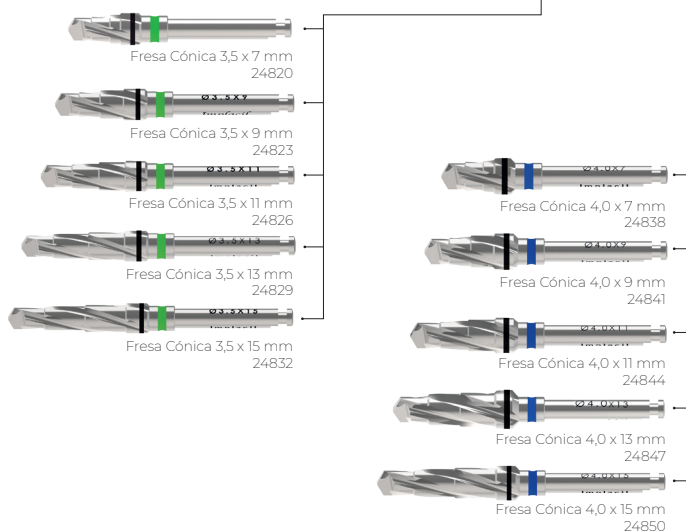



Imagen ilustrativa. Sugerencia de configuración del Primo Cónico HE | CM o HI | CM. Este estuche puede configurarse como Cónico Hexágono Externo y Cónico Cono Morse o Cónico Hexágono Interno y Cono Morse. Compruebe la configuración ofrecida o configúrela de la mejor manera para satisfacer sus necesidades.




QUIRÚRGICO IMPLAGUIDE

CM Ø 3,5 y 4,0


Anillas (Envase con 10 unidades)

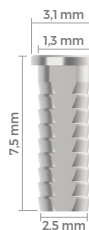

Anilla del Pasador de Fijación para Cirugía Guiada
Indicación:
Instalación del Pasador de Fijación 30488

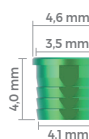

Anilla de 3,5
Indicación:
Maestro y Due Cone 30487

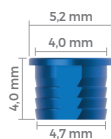

Anilla de 4,0
Indicación:
Maestro y Due Cone 30693

Las anillas se venden por separado. Estos productos no forman parte del Conjunto Implaguide 3.5/4.0.

Conjunto - 34498
Estuche - 34509

