


## APLICACIÓN

- » Indicación para casos múltiples;
- » Prótesis fijas y protocolos en general;
- » El conjunto del componente y los accesorios requiere una altura interoclusal aproximada de 4,8 mm, debiendo considerarse también el volumen metalocerámico según la planificación y ejecución protésica;
- » El componente angulado de 17° o 30° permite corregir la angulación de los implantes;
- » Instalación Mini Cónico Recto: Llave Cónico Estético Mini Cónico - n.º 5;
- » Instalación Transfer Mini Cónico Moldeador Cerrado: Llave Fricción n.º 3;
- » Par de instalación: 20 Ncm;
- » Par de instalación del casquillo: 10 Ncm.

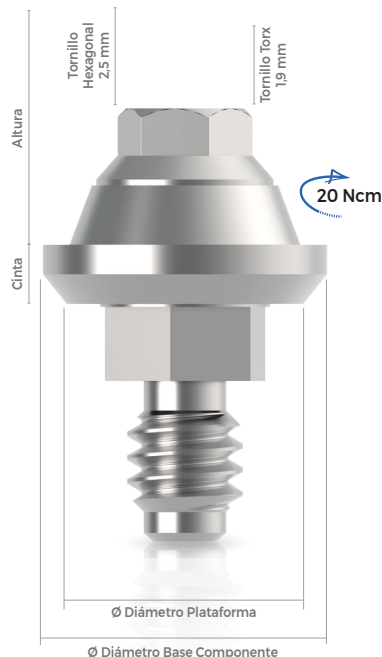

## HI

| Plataforma | Ø 3,5 | Ø 4,0 | Ø 5,0 |
|------------|-------|-------|-------|
| Cinta      |       |       |       |
| 1 mm       | 2554  | 2585  | 2615  |
| 2 mm       | 2561  | 2592  | 2622  |
| 3 mm       | 2578  | 2608  | 2639  |

Para implantes de 7 mm a 15 mm.  
Diámetro del componente Ø 4,8 mm.

## HI ST

| Cinta | Ø Diámetro Plataforma |
|-------|-----------------------|
| 1 mm  | 28264                 |
| 2 mm  | 28233                 |
| 3 mm  | 28240                 |

Para implantes de 5 mm a 6 mm.  
Diámetro del componente Ø 4,8 mm.

## SECUENCIA DE APLICACIÓN

| TIPO              | INSTALACIÓN                                                                                                                                                                                  | CICATRIZACIÓN/PROVISIONAL                                                                                                                                 | TRANSFER ANALÓGICO                                                                                                                     | TRANSFER DIGITAL EXOCAD®                                                                                                  | ANÁLOGO D/Y                                                                                                     | CASQUILLO                                                                                                                                                     | INSTALACIÓN CASQUILLO                                                                                                                                                                          | REPOSICIÓN                                                                                                                                                                                              |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Recto Múltiple    | Llave n.º 5 Promedio<br>Cód. 18661<br><br>20 Ncm                                                          | Tapa de Cicatrización<br>Cód. 18548<br>                                | Transfer Mold. Abierto Rotacional<br>Cód. 13512<br> | Rotacional<br>Cód. 30783<br>           | Rotacional<br>Cód. 30880<br> | Casquillo Base Cromo Rotacional (Laboratorio)<br>Cód. 27434<br>10 Ncm<br> | Llave Hexagonal n.º 7 - 1,17 mm Corta   Cód. 20626 Promedio   Cód. 18685 Larga   Cód. 20619<br>10 Ncm<br> | Tornillo Casquillo (Atornillado)<br>Tornillo Hexagonal 1,17 mm<br>Cód. 4787<br>Llave Hexagonal n.º 7 - 1,17 mm<br> |
| Angulado Múltiple | Llave Hexagonal n.º 7 - 1,17 mm Corta   Cód. 20626 Promedio   Cód. 18685 Larga   Cód. 20619<br>20 Ncm<br> | Casquillo Titanio Rotacional (Provisional)<br>Cód. 18302<br>10 Ncm<br> | Transfer Mold. Cerrado Rotacional<br>Cód. 4282<br>  | Rotacional<br>Cód. 30783<br>10 Ncm<br> | Rotacional<br>Cód. 30880<br> | Casquillo Plástico Rotacional (Laboratorio)<br>Cód. 17749<br>10 Ncm<br>   | Llave Hexagonal n.º 7 - 1,17 mm Corta   Cód. 20626 Promedio   Cód. 18685 Larga   Cód. 20619<br>10 Ncm<br> | Tornillo Torx T6 1,4x2,0 mm<br>Cód. 30129<br>Llave Torx T6<br>                                                     |
|                   |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                           |                                                                                                                 | Pilar Base T Rotacional (CAD/CAM MetalFree)<br>Cód. 25488<br>10 Ncm<br>   |                                                                                                                                                                                                | Tornillo Trabajo Casquillo<br>Cód. 24686<br>Llave Hexagonal n.º 7 - 1,17 mm<br>                                    |

R - Rotacional | ST - Implantes de 5/6 mm | D/Y - Digital o Yeso.

La Selección de componentes para Hexágono Interno debe seguir la misma plataforma que el implante instalado. Para implantes de Ø 3,3 y Ø 3,5, será de Ø 3,5; para implantes de Ø 3,75, Ø 4,0 y Ø 4,3, será de Ø 4,0; para implantes de Ø 4,75 y Ø 5,0, será de Ø 5,0, como se muestra en la tabla "Plataforma Protésica" de la página 67. Casquillo titanio, casquillos plásticos, Base Cromo y Pilar digital Base T vienen con tornillo hexagonal de 1,17 mm. El tornillo Torx debe adquirirse por separado.




# MINI CÓNICO ANGULADO

## PRÓTESIS ATORNILLADA

### APLICACIÓN

- » Indicación para casos múltiples;
- » Prótesis fijas y protocolos en general;
- » El componente angulado de 17° o 30° permite corregir la angulación de los implantes;
- » El conjunto del componente y los accesorios requiere una altura interoclusal aproximada de 4,8 mm, debiendo considerarse también el volumen metalocerámico según la planificación y ejecución protésica;
- » Instalación Mini Cónico Angulado/Casquillo/Tornillo del Transfer de Moldeador Abierto: Llave Hexagonal n.º 7 - 1,17 mm;
- » Instalación Transfer Mini Cónico Moldeador Cerrado: Llave Fricción n.º 3;
- » Par de instalación: 20 Ncm;
- » Par de instalación del casquillo: 10 Ncm.

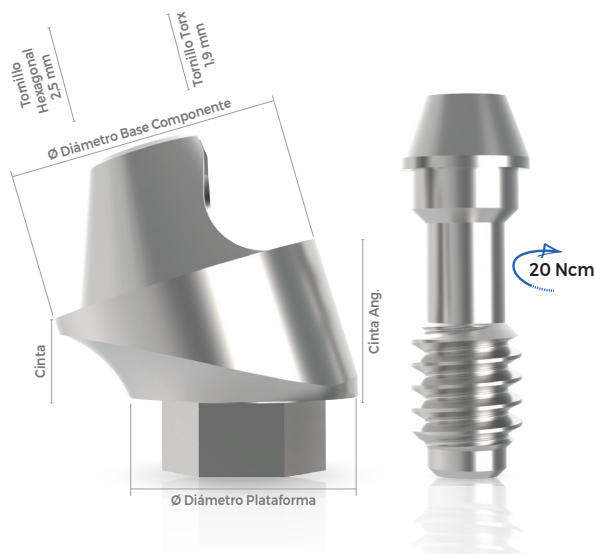

### HI ANGULADO

|                  | Ø Diámetro Plataforma | Ø 3,5 | Ø 4,0 | Ø 5,0 |
|------------------|-----------------------|-------|-------|-------|
| Cinta            | 2 mm                  | 20084 | 20077 | 22101 |
| Cinta Ángulo 17° | 2,5 mm                |       |       |       |
| Cinta            | 3 mm                  | 20718 | 21449 | 21456 |
| Cinta Ángulo 30° | 3,2 mm                |       |       |       |

Para implantes de 7 mm a 15 mm. Diámetro del componente Ø 4,8 mm.

### SECUENCIA DE APLICACIÓN

| TIPO                 | INSTALACIÓN                                                                                                                                                                                       | CICATRIZACIÓN/<br>PROVISIONAL                                                                                                                         | TRANSFER<br>ANALÓGICO                                                                                                                           | TRANSFER<br>DIGITAL<br>EXOCAD®                                                                                  | ANÁLOGO<br>D/Y                                                                                                  | CASQUILLO                                                                                                                                                     | INSTALACIÓN<br>CASQUILLO                                                                                                                                                                            | REPOSICIÓN                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Recto<br>Múltiple    | Llave n.º 5<br>Promedio<br>Cód. 18661<br>                                                                      | Tapa de<br>Cicatrización<br>Cód. 18548<br>                         | Transfer<br>Mold.<br>Abierto<br>Rotacional<br>Cód. 13512<br> | Rotacional<br>Cód. 30783<br> | Rotacional<br>Cód. 30880<br> | Casquillo Base<br>Cromo<br>Rotacional<br>(Laboratorio)<br>Cód. 27434<br> | Llave Hexagonal<br>n.º 7 - 1,17 mm<br>Corta   Cód. 20626<br>Promedio  <br>Cód. 18685<br>Larga   Cód. 20619<br> | Tornillo<br>Casquillo<br>(Atornillado)<br>Tornillo Hexagonal<br>1,17 mm<br>Cód. 4787<br>Llave Hexagonal<br>n.º 7 - 1,17 mm<br> |
|                      | Llave Hexagonal<br>n.º 7 - 1,17 mm<br>Corta   Cód. 20626<br>Promedio  <br>Cód. 18685<br>Larga   Cód. 20619<br> | Casquillo Titanio<br>Rotacional<br>(Provisional)<br>Cód. 18302<br> | Transfer<br>Mold.<br>Cerrado<br>Rotacional<br>Cód. 4282<br>  | Rotacional<br>Cód. 30783<br> | Rotacional<br>Cód. 30880<br> | Casquillo Plástico<br>Rotacional<br>(Laboratorio)<br>Cód. 17749<br>      | Llave Hexagonal<br>n.º 7 - 1,17 mm<br>Corta   Cód. 20626<br>Promedio  <br>Cód. 18685<br>Larga   Cód. 20619<br> | Tornillo Torx<br>T6 1,4x2,0 mm<br>Cód. 30129<br>Llave Torx T6<br>                                                              |
| Angulado<br>Múltiple | Llave Hexagonal<br>n.º 7 - 1,17 mm<br>Corta   Cód. 20626<br>Promedio  <br>Cód. 18685<br>Larga   Cód. 20619<br> | Casquillo Titanio<br>Rotacional<br>(Provisional)<br>Cód. 18302<br> | Transfer<br>Mold.<br>Cerrado<br>Rotacional<br>Cód. 4282<br>  | Rotacional<br>Cód. 30783<br> | Rotacional<br>Cód. 30880<br> | Pilar Base T<br>Rotacional<br>(CAD/CAM<br>MetalFree)<br>Cód. 25488<br>   | Llave Hexagonal<br>n.º 7 - 1,17 mm<br>Corta   Cód. 20626<br>Promedio  <br>Cód. 18685<br>Larga   Cód. 20619<br> | Tornillo<br>Trabajo Casquillo<br>Cód. 24686<br>Llave Hexagonal<br>n.º 7 - 1,17 mm<br>                                          |
|                      | Llave Hexagonal<br>n.º 7 - 1,17 mm<br>Corta   Cód. 20626<br>Promedio  <br>Cód. 18685<br>Larga   Cód. 20619<br> | Casquillo Titanio<br>Rotacional<br>(Provisional)<br>Cód. 18302<br> | Transfer<br>Mold.<br>Cerrado<br>Rotacional<br>Cód. 4282<br>  | Rotacional<br>Cód. 30783<br> | Rotacional<br>Cód. 30880<br> | Pilar Base T<br>Rotacional<br>(CAD/CAM<br>MetalFree)<br>Cód. 25488<br>   | Llave Hexagonal<br>n.º 7 - 1,17 mm<br>Corta   Cód. 20626<br>Promedio  <br>Cód. 18685<br>Larga   Cód. 20619<br> | Tornillo<br>Trabajo Casquillo<br>Cód. 24686<br>Llave Hexagonal<br>n.º 7 - 1,17 mm<br>                                          |

R - Rotacional | ST - Implantes de 5/6 mm | D/Y - Digital o Yeso.

La Selección de componentes para Hexágono Interno debe seguir la misma plataforma que el implante instalado. Para implantes de Ø 3,3 y Ø 3,5, será de Ø 3,5; para implantes de Ø 3,75, Ø 4,0 y Ø 4,3, será de Ø 4,0; y para Ø 4,75 y Ø 5,0, será de Ø 5,0. Como se muestra en la tabla "Plataforma Protésica" página 69. Casquillo titanio, casquillos plásticos, Base Cromo y Pilar digital Base T vienen con tornillo hexagonal de 1,17 mm. El tornillo Torx debe adquirirse por separado.