




APLICACIÓN


- » Indicación para casos unitarios/múltiples;
- » Antirrotacional (AR) o Rotacional (R);
- » Componente en titanio, usado para confección de elementos provisionales y aplicado directamente sobre el implante;
- » Puede personalizarse;
- » Viene con tornillo definitivo;
- » Instalación Transfer de Moldeador Abierto: Llave Hexagonal n.º 7 - 1,17 mm;
- » Instalación Transfer Moldeador Cerrado: Llave Fricción n.º 3;
- » Instalación: Llave Cuadrada n.º 4 - 1,3 mm;
- » Par de instalación: 30 Ncm.

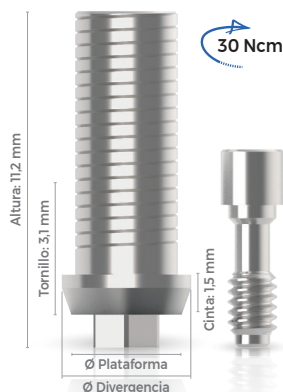

TITANIO HI

AR R	Ø 3,5	Ø 4,0	Ø 5,0
Antirrotacional	14816	14250	14410
Rotacional	14809	14083	14106

Para implantes de 7 mm a 15 mm.

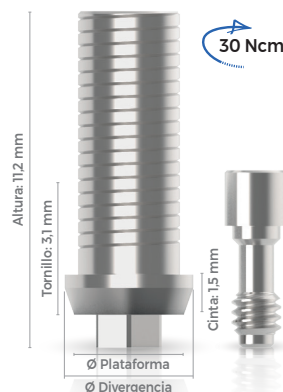


TITANIO HI ST

AR R	Ø 4,0
Antirrotacional	214452
Rotacional	214445

Para implantes de 5 mm a 6 mm.

SECUENCIA DE APLICACIÓN

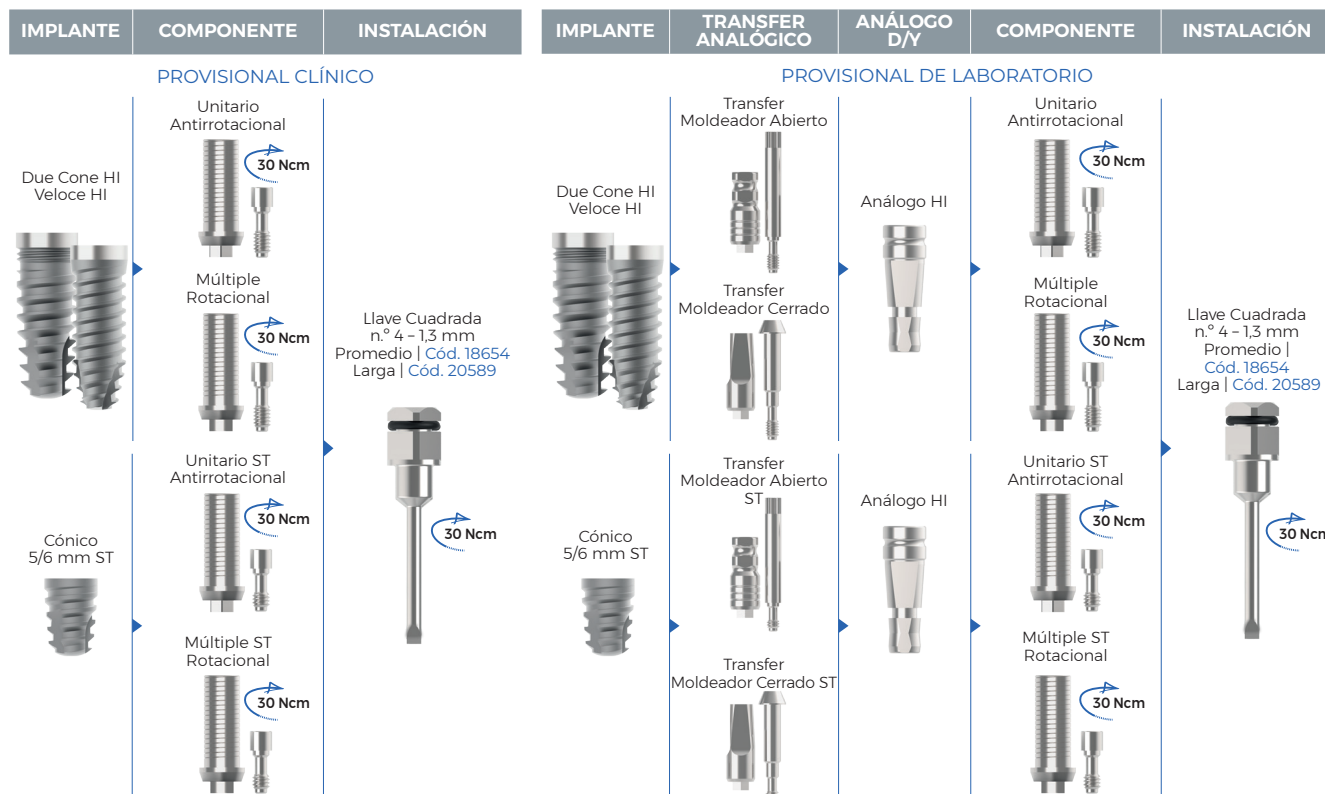

AR - Antirrotacional | R - Rotacional | ST - Implantes de 5/6 mm | D/Y - Digital o Yeso.

HI

Moldeador	Ø 3,5	Ø 4,0	Ø 5,0
Abierto HI	14854	15899	14779
Cerrado HI	4404	4411	4428

HI ST

Moldeador	Ø 4,0
Abierto HI	214247
Cerrado HI	214278

ANÁLOGO D/Y

	Ø 3,5	Ø 4,0	Ø 5,0
HI D/Y	31513	31514	31515

TORNILLO DEFINITIVO

M	Ø 3,5	Ø 4,0 ST	Ø 4,0/Ø 5,0
1,8	229951	-	-
2,0	-	211178	229982

TORNILLO DE TRABAJO

M	Ø 3,5	Ø 4,0 ST	Ø 4,0/Ø 5,0
1,8	229968	-	-
2,0	-	21115	27328

La Selección de componentes para Hexágono Interno debe seguir la misma plataforma que el implante instalado. Para implantes de Ø 3,3 y Ø 3,5, será de Ø 3,5; para implantes de Ø 3,75, Ø 4,0 y Ø 4,3, será de Ø 4,0; para implantes de Ø 4,75 y Ø 5,0, será de Ø 5,0, como se muestra en la tabla "Plataforma Protésica" de la página 67.