

APLICACIÓN

- » Indicación para casos unitarios;
- » Indicado para prótesis cementadas o atornilladas;
- » Pilar sólido, cuerpo único (no posee indexación);
- » Diámetro: 3,3 y 4,5;
- » Altura: de 4,0 y 6,0;
- » Cintas: 0,8/1,5/2,5/3,5/4,5/5,5;
- » Los pilares de 4,0 mm de altura permiten cementar la prótesis con total seguridad de retención independientemente de su diámetro (3,3 o 4,5);
- » Puede aplicarse en implantes Cono Morse Convencional y Cono Morse AR Due Cone y Maestro;
- » Todos los diámetros y cintas pueden utilizarse en cualquier diámetro de implantes Cono Morse y Cono Morse CM AR y Maestro, facilitando la solución protésica;
- » Su principal indicación es para prótesis unitarias, pudiendo utilizarse para prótesis múltiples;
- » Tiene análogos, transferentes de moldeado (plástico), casquillos de provisional atornillado (titanio) y fundición (plástico) correspondientes al diámetro y altura de los pilares;
- » En casos de prótesis múltiples, necesita paralelismo;
- » Estos componentes no pueden usarse en implantes CM ST Cono Morse de 5 y 6 mm;
- » Para usar el Pilar Ideale como elemento atornillado, se debe añadir 2 mm a la planificación; este aumento se refiere al uso del tornillo para la fijación de la corona;
- » Los Casquillos Plásticos no vienen con tornillos; tornillos Hexagonales y Torx compra opcional; el casquillo de Titanio viene con Tornillo Hexagonal de 1,17 mm para Provisional Atornillado o uso como Tapa de Cicatrización;
- » Instalación Pilar: utilizar la llave muñón/pilar adecuada para el diámetro y la altura del pilar seleccionado (llave Universal 3,3x4/3,5x4, 3,3x6/3,5x6, 4,5x4 o 4,5x6);
- » Casquillo Atornillado (titanio o plástico): llave Hexagonal n.º 7 - 1,17 mm;
- » Par de instalación Pilar: 30 Ncm;
- » Par de instalación para Casquillo en Prótesis Atornilladas: 10 Ncm.



CM

Cinta	Diámetro x Altura			
	3,3x4	3,3x6	4,5x4	4,5x6
0,8 mm	25733	25745	25757	25769
1,5 mm	25735	25747	25759	25771
2,5 mm	257374	25749	25761	25773
3,5 mm	25739	257510	25763	257756
4,5 mm	25741	25753	25765	25777
5,5 mm	25743	25755	25767	25779

Para implantes de 7 mm a 17 mm.

CM/CM AR/CM 11,5° compatibles.



CONOZCA MÁS



Diámetro	Altura	Llave Instalación	Transfer Analógico	Transfer Digital Exocad®	Análogo D/Y	Casquillo Plástico C/A AR	Casquillo Titanio P AR	Tornillo Casquillo Hexagonal	Tornillo Casquillo Torx	Túnel Check Prótesis CM
Ø 3,3 mm	4 mm	32229	29190	30789	31518	25849	25861			
	6 mm	32230	29191	30791	31519	25852	25864			
Ø 4,5 mm	4 mm	32231	29192	30793	31520	25855	25866	4763	30131	20701
	6 mm	32232	29193	30795	31521	25858	25868			

SECUENCIA DE APLICACIÓN

PILAR	INSTALACIÓN	CICATRIZACIÓN/PROVISIONAL	TRANSFER	ANÁLOGO D/Y	CASQUILLO (ANALÓGICO)	ATORNILLADA	FINALIZACIÓN
Recto	Llave 30 Ncm	Casquillo Titanio Antirrotacional Atornillado (Provisional/Tapa de Cicatrización)	ANALÓGICO DIGITAL EXOCAD®		Casquillo Plástico Antirrotacional Cementado o Atornillado (Laboratorio Analógico)	Tornillo Casquillo (Atornillado) Tornillo Hexagonal 1,17 mm Cód. 4763 Tornillo Torx T6 1,4 x 2,7 mm Cód. 30131	Elemento Cementado (Cementación) Elemento Atornillado Llave n.º 7 Llave Torx T6 10 Ncm

AR – Antirrotacional | C/A – Cementada o Atornillada | A – Atornillada | D/Y – Digital o Yeso.

Casquillo de titanio y transfer digital vienen con tornillo hexagonal de 1,17 mm. Casquillos de plástico no vienen con tornillos, ya que pueden utilizarse como cementados (sin tornillo) o atornillados. El tornillo hexagonal de 1,17 mm o el tornillo Torx T6 deben adquirirse por separado. Compruebe siempre si dispone de la llave correspondiente en su conjunto protésico.



APLICACIÓN

- » Indicación para casos unitarios;
- » Indicado para prótesis cementadas o atornilladas;
- » Permite su instalación en 12 posiciones por la presencia del index;
- » Angulado 17° y 30° (consultar columna CA);
- » Diámetro: 3,3 y 4,5;
- » Altura: de 4,0 y 6,0;
- » Los pilares de 4,0 mm de altura permiten cementar la prótesis con total seguridad de retención independientemente de su diámetro (3,3 o 4,5);
- » Cintas 1,5, 2,5 y 3,5;
- » Debe aplicarse a implantes Cono Morse AR Due Cone y Maestro;
- » No compatible con otros sistemas de implantes;
- » El posicionamiento indexado (AR) permite reposicionar el elemento cuando sea necesario;
- » Permite la rehabilitación de implantes con posición desfavorable, favoreciendo el paralelismo entre ellos o con los dientes adyacentes;
- » Todos los diámetros y cintas pueden utilizarse en cualquier diámetro de implantes Cono Morse y CM AR, facilitando la solución protésica;
- » Su principal indicación es para prótesis unitarias, pudiendo utilizarse para prótesis múltiples;
- » En casos de prótesis múltiples, necesita paralelismo;
- » Tiene análogos, transferentes de moldeado (plástico), casquillos de provisional atornillado (titanio) y fundición (plástico) correspondientes al diámetro y altura de los pilares;
- » Estos componentes no pueden usarse en implantes CM ST Cono Morse de 5 y 6 mm;
- » Para usar el Pilar Ideal como elemento atornillado, se debe añadir 2 mm a la planificación; este aumento se refiere al uso del tornillo para la fijación de la corona;
- » Los Casquillos Plásticos no vienen con tornillos; tornillos Hexagonales y Torx compra opcional; el casquillo de Titanio viene con Tornillo Hexagonal de 1,17 mm para Provisional Atornillado o uso como Tapa de Cicatrización;
- » Par de instalación Pilar: 20 Ncm;
- » Instalación Pilar: Llave Hexagonal n.º 7 - 1,17 mm;
- » Casquillo Atornillado (titanio o plástico): Llave Hexagonal n.º 7 - 1,17 mm;
- » Par de instalación para Casquillo en Prótesis Atornilladas: 10 Ncm.



CONOZCA MÁS




Diámetro	Altura	Transfer Analógico	Transfer Digital Exocad®	Análogo D/Y	Casquillo Plástico C/A AR	Casquillo Titanio P AR	Tornillo Casquillo Hexagonal	Tornillo Casquillo Torx	Túnel Check Prótesis CM
Ø 3,3 mm	4 mm	29190	30789	31518	25849	25861	4763	30131	20701
	6 mm	29191	30791	31519	25852	25864			
Ø 4,5 mm	4 mm	29192	30793	31520	25855	25866			
	6 mm	29193	30795	31521	25858	25868			

SECUENCIA DE APLICACIÓN

PILAR	INSTALACIÓN	CICATRIZACIÓN/PROVISIONAL	TRANSFER	ANÁLOGO D/Y	CASQUILLO (ANALÓGICO)	ATORNILLADA	FINALIZACIÓN
Angulado AR (Laboratorio)	Llave Hexagonal n.º 7 - 1,17 mm Corta Cód. 20626 Promedio Cód. 18685 Larga Cód. 20619	Casquillo Titanio Antirrotacional Atornillado (Provisional/Tapa de Cicatrización)	ANALÓGICO DIGITAL EXOCAD®		Casquillo Plástico Antirrotacional Cementado o Atornillado (Laboratorio Analógico)	Tornillo Casquillo (Atornillado) Tornillo Hexagonal 1,17 mm Cód. 4763 Tornillo Torx T6 1,4 x 2,7 mm Cód. 30131	Elemento Cementado (Cementación) Elemento Atornillado Llave n.º 7 Llave Torx T6 10 Ncm

AR – Antirrotacional | C/A – Cementada o Atornillada | A – Atornillada | D/Y – Digital o Yeso.

*Cinta ángulo: se debe añadir el valor correspondiente considerando como cinta la suma de la cinta ángulo a la cinta seleccionada. Casquillo de titanio y transfer digital vienen con tornillo hexagonal de 1,17 mm. Casquillos de plástico no vienen con tornillos, ya que pueden utilizarse como cementados (sin tornillo) o atornillados. El tornillo hexagonal de 1,17 mm o el tornillo Torx T6 deben adquirirse por separado. Compruebe siempre si dispone de la llave correspondiente en su conjunto protésico.

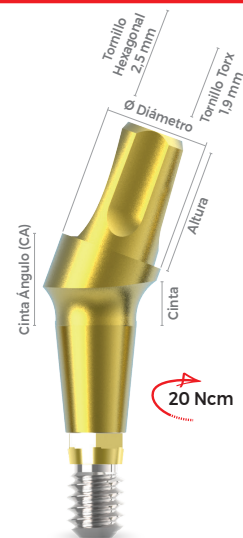

CM AR

Diámetro x Altura x Cinta x Cinta Ángulo (CA)						
Cinta	3,3x4	3,3x6	CA 17°	4,5x4	4,5x6	CA 17°
1,5 mm	25871	25877	2,6 mm	25883	25889	3,1 mm
2,5 mm	25873	25879	3,6 mm	25885	25891	4,1 mm
3,5 mm	25875	25881	4,6 mm	25887	25893	5,1 mm
Cinta	3,3x4	3,3x6	CA 30°	4,5x4	4,5x6	CA 30°
1,5 mm	25895	25901	3,2 mm	25907	25913	3,8 mm
2,5 mm	25897	25903	4,2 mm	25909	25915	4,8 mm
3,5 mm	25899	25905	5,2 mm	25911	25917	5,8 mm

Para implantes de 7 mm a 17 mm. CM AR.

OPCIÓN DE MOLDEADO PARA SELECCIÓN DE COMPONENTES.



Componentes para Implantes	Transfer CM AR Mold. Abierto	Transfer CM AR Mold. Cerrado	Análogo CM/CM AR
Transferencia del implante	228930	228923	227667





PRÓTESIS CEMENTADA/ATORNILLADA

APLICACIÓN

- » Indicación para casos unitarios;
- » Los pilares Base T son componentes protésicos usados para sistemas CAD/CAM. Permiten fabricar pilares cerámicos personalizados para una amplia gama de soluciones individualizadas;
- » La línea Base T también cuenta con el sistema Transfer Digital para implante o Transfer Digital Base T para copiar el Base T, que ofrece una calidad de superficie superior y una geometría única para obtener resultados de escaneo de alta precisión.
- » Instalación Base T: Llave Hexagonal n.º 7 - 1,17 mm;
- » Par de instalación: 20 Ncm;
- » Para uso en Exocad® realice la descarga en nuestro sitio web.



CONOZCA MÁS



CM AR

Cinta	Ø 3,5	Ø 4,5
0,8 mm	24536	24544
1,5 mm	24538	24546
2,5 mm	24540	24548
3,5 mm	24542	24550
Divergencia	Ø 4,0	Ø 5,0
Descripción	Small	Large

Para implantes de 7 mm a 17 mm. CM AR.



TRANSFER DIGITAL IMPLANTE CM AR

Descripción
CM AR 30769



TRANSFER DIGITAL BASE T

Descripción
Base T Ø 3,5 31683
Base T Ø 4,0 (4,5) 31784

SECUENCIA DE APLICACIÓN – ESCaneo INTRAORAL

IMPLANTE	CICATRIZADOR/ PROVISIONAL	TRANSFER DIGITAL	INSTALACIÓN	ANÁLOGO D/Y	COMPONENTE	INSTALACIÓN
Maestro CM AR Due Cone CM AR Veloce CM AR	Cicatrizador Pilar Provisional CM AR 20 Ncm	CM AR Cód. 30769 	Llave Hexagonal n.º 7 - 1,17 mm Corta Cód. 20626 Promedio Cód. 18685 Larga Cód. 20619 20 Ncm	CM AR Cód. 31509 	Base T CM AR 20 Ncm	Llave Hexagonal n.º 7 - 1,17 mm Corta Cód. 20626 Promedio Cód. 18685 Larga Cód. 20619 20 Ncm

SECUENCIA DE APLICACIÓN – ESCaneo EXTRAORAL

IMPLANTE	CICATRIZADOR/ PROVISIONAL	TRANSFER	TRANSFER DIGITAL	ANÁLOGO D/Y	COMPONENTE	INSTALACIÓN
Maestro CM AR Due Cone CM AR Veloce CM AR	Cicatrizador Pilar Provisional CM AR 20 Ncm	Moldeador Abierto CM AR Cód. 228930 Moldeador Cerrado CM AR Cód. 228923 	CM AR Cód. 30769 	CM AR Cód. 31509 	Base T CM AR 20 Ncm	Llave Hexagonal n.º 7 - 1,17 mm Corta Cód. 20626 Promedio Cód. 18685 Larga Cód. 20619 20 Ncm